

Fermer Lock 'n Roll Microseal

Utilité


- Les sacs vidables présentent une ouverture au bas pour permettre la vidange. Ils requièrent un fermoir.
- Videz votre sac lorsqu'il est rempli au tiers ou à moitié de matières évacuées ou de gaz.
- Le fermoir **Lock 'n Roll Microseal** est un dispositif intégré aux sacs vidables.

Avant d'installer un nouveau sac, fermez l'extrémité (illustrations 4 et 5).



Ouverture

Ouvrez à partir du centre du rabat transparent.

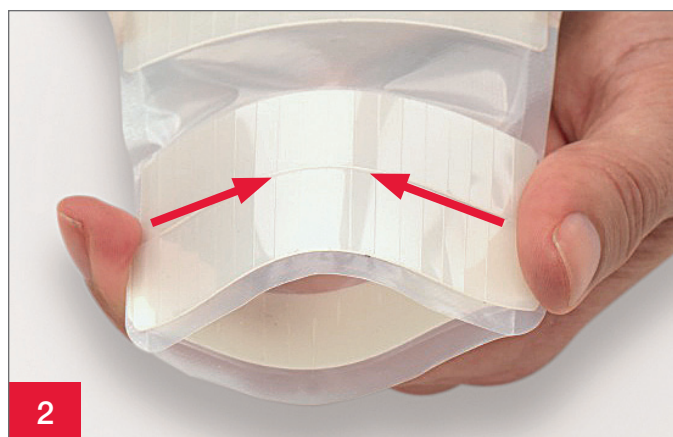


Drainage

Placez un doigt de chaque côté de l'extrémité du sac, entre les bandes striées, et pressez. Maintenez le sac ouvert pour le nettoyer.



Nettoyage

Nettoyez et séchez la face intérieure de l'extrémité du sac. Essuyez le bord extérieur de l'extrémité du sac.

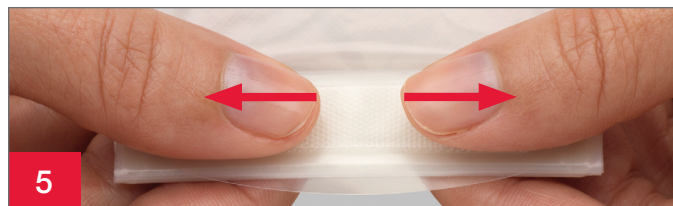

Fermeture

Roulez l'extrémité du sac bien serré en faisant trois tours. Repliez le rabat en alignant les bandes (illustration 4).

Pour fermer, appuyez d'abord au centre et pressez vers l'extérieur. Vous sentirez les bandes s'agripper (illustration 5).

Fermoir Lock 'n Roll Microseal

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q : Comment est-ce que je sais que mon sac est bien fermé?

R : En alignant les bandes entrecroisées et en appuyant sur le rabat de sécurité en partant du centre vers l'extérieur, vous sentirez que les bandes s'agrippent et que le sac est bien fermé.

Q : Le fermoir est-il sécuritaire lorsqu'il est mouillé?

R : Les bandes sont faites d'un matériau à l'épreuve de l'eau et peuvent être fermées même lorsqu'elles sont mouillées, mais elles sont plus efficaces lorsqu'elles sont sèches.

Q : Le fermoir sera-t-il visible à travers mes vêtements?

R : Le fermoir est mince et discret, et passera inaperçu sous la plupart des vêtements.

Q : Le fermoir est-il confortable contre le corps?

R : Le fermoir est mince et arrondi pour épouser les courbes naturelles du corps, assurant un confort optimal.

Q : Le fermoir peut-il s'ouvrir accidentellement?

R : Des tests en laboratoire ont démontré que les bandes entrecroisées restent bien fixées lorsqu'elles sont fermées correctement.

Q : L'écoulement de ma stomie est très liquide. Avez-vous des suggestions pour faciliter la vidange?

R : Compte tenu de la conception unique du fermoir, vous voudrez peut-être contrôler le drainage du liquide en déroulant l'extrémité du sac de deux tours seulement et en maintenant le rabat vers le haut. Vous pouvez ensuite dérouler le rabat une dernière fois lentement.

Pour toute question au sujet des produits, pour obtenir des échantillons ou pour toute question clinique, composez le **1 800 263-7400**.

Il est recommandé d'être suivi régulièrement par un professionnel de la santé.

Avant l'utilisation de tout produit ou accessoire pour stomie, assurez-vous de bien lire les instructions et étiquettes.

Le logo Hollister, Lock 'n Roll et « Peau saine. Résultats positifs. » sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.
© 2017 Hollister Incorporated. 923068-1117 US-00195

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1 800 323-4060

www.hollister.com

Hollister Limited
95 Eric T Smith Way
Aurora On
L4G 0Z6
1 800 263-7400