



Einteiliges Versorgungssystem

Verbrauchsmaterial bereitlegen

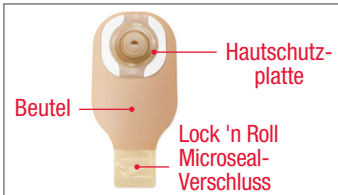

Legen Sie Beutel, Entsorgungsbeutel, fusselfreie Kompressen oder Reinigungstücher und Wasser bereit. Optional: Schere, Stift, Messhilfe, Zubehör.

Bereiten Sie die Hautschutzplatte und den Beutel vor

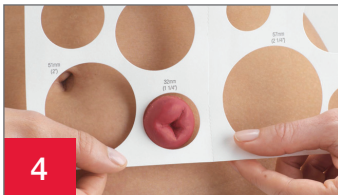

Messen Sie das Stoma vor jeder Anwendung des Hautschutzes mit einer Stomamesshilfe aus (wenn Sie eine vorgefertigte Hautschutzöffnung verwenden, gehen Sie zu Schritt 7).

Benutztes Versorgungssystem entfernen



Heben Sie vorsichtig eine Kante des Klebers an und ziehen Sie sie nach unten ab. Schieben Sie die Haut vorsichtig von der Hautschutzplatte weg. Entsorgen Sie den gebrauchten Beutel ordnungsgemäß. Nicht in der Toilette herunterspülen.

Haut reinigen und trocknen



Reinigen Sie die Haut mit Wasser oder einer milden Seife, wie von Ihrem Arzt empfohlen. Gründlich abspülen und trocknen. Verwenden Sie keine Öle, Puder, Lotionen oder lotionsartige Seifen auf der Haut.

Zustand der Haut prüfen



Vergewissern Sie sich, dass die Haut um Ihr Stoma (peristomal) intakt ist und keine Reizungen, Ausschläge oder Rötungen aufweist.*

* Kontaktieren Sie Ihre WOC/NSWOC-Pflegekraft, wenn Sie Reizung, Ausschlag oder Rötung bemerken



Übertragen Sie die Maße des Stomas auf die Folie des Hautschutzes. Die Hautschutzplatte sollte dort sitzen, wo Haut und Stoma aufeinandertreffen. Stellen Sie sicher, dass keine Haut zwischen der Hautschutzplatte und dem Stoma zu sehen ist, um Leckagen und Hautreizungen zu vermeiden.




Schneiden Sie mit einer kleinen gebogenen Schere vorsichtig eine Öffnung in die Hautschutzplatte, die dem Muster entspricht. Schneiden Sie nicht über die Linie auf der Trennfolie hinaus. Durchstechen Sie den Beutel nicht.



Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hautschutzplatte.

Bei Bedarf Paste oder Ringe hinzufügen

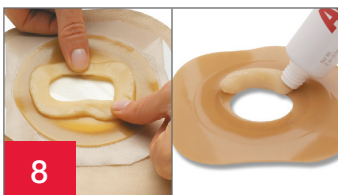

Bringen Sie gegebenenfalls einen Hautschutzring oder einen dünnen Wulst aus Paste um die Öffnung herum an und befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisung.


Neues Versorgungssystem anwenden



Zentrieren Sie die Hautschutzplattenöffnung über dem Stoma.




Drücken Sie etwa eine Minute lang sanft auf den Hautschutz, um eine optimale Haftung zu erreichen.

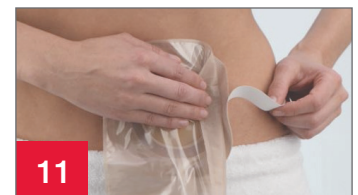

Bei Hautschutz mit Haftband entfernen Sie das Trägerpapier auf beiden Seiten und drücken die Klebefläche vorsichtig auf die Haut.



Schließen Sie den Boden des Beutels. Wenn Sie einen Ausstreifbeutel verwenden, schließen Sie den **Lock 'n Roll**-Verschluss am Boden des Beutels oder bringen Sie eine Beutelklemme an. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Verschlusssystems finden Sie im *Pflegehinweise für den Lock 'n Roll Microseal-Verschluss*.

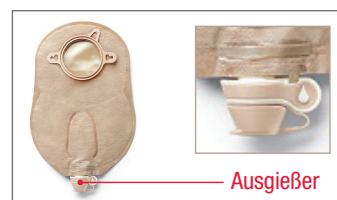

Wenn Sie einen Urostomiebeutel verwenden, stellen Sie sicher, dass das Abstreifventil geschlossen ist. Die Träne auf dem Abstreifventil sollte zur Körperseite des Beutels zeigen.

Falls gewünscht, bringen Sie die mitgelieferte Kappe an.

Einteiliges Versorgungssystem

| TIPPS | LISTE DER PRODUKTE | LAGERBESTAND-NR. |
|---|--------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Haut um Ihr Stoma sollte keine Anzeichen von Ausschlag oder Wunden aufweisen • Gereizte Haut sollte von einem Arzt untersucht werden • Wenn Sie einen Hautschutzring oder eine Hautschutzpaste verwenden, tragen Sie diese wie vorgeschrieben auf die haftende Seite der Hautschutzplatte neben der Stomaöffnung auf • Ihr Stoma wird nach der Operation wahrscheinlich geschwollen sein. Es kann mehrere Wochen oder Monate dauern, bis das Stoma auf seine endgültige Größe geschrumpft ist • Das Stoma kann leicht bluten, wenn Sie es reinigen • Die Verwendung von Hautschutztüchern wird unter Hautschutzplatten, die über einen längeren Zeitraum getragen werden, nicht empfohlen, da sie die Tragedauer verkürzen können. | Einteiliges Versorgungssystem | _____ |
| | Zubehör | |
| | Hautschutzringe | _____ |
| | Stoma-Gürtel | _____ |
| | Paste | _____ |
| | Geruchsneutralisierendes Gleitmittel | _____ |
| | Hautschutzpuder | _____ |
| Sonstige _____ | _____ | |

Zusätzliche Anweisungen

Wenn Sie Fragen zu Produkten, Probenahmen oder detaillierte klinische Fragen zu unseren Produkten in den USA haben, rufen Sie uns unter **1.888.808.7456** an. In Kanada rufen Sie **1.800.263.7400** an.

www.hollister.com

Die Haut muss vor dem Anlegen der Hautschutzplatte sauber und trocken sein.

Lesen Sie vor der Anwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung, um sich über den Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen zu informieren.

Das Hollister-Logo, Lock 'n Roll und „Gesunde Haut. Gute Aussichten.“ sind Marken von Hollister Incorporated. © 2018 Hollister Incorporated. 923069-1118 US-00667