

Tek Parçalı Torba Sistemi

Sarf Malzemelerini Hazırlayın



Torba, atık torbası, temizlik için kağıt mendil ve/veya bez ile su hazırlayın. İsteğe Bağlı: Makas, kalem, ölçüm cetveli, aksesuarlar.

Kullanılmış Torba Sisteminin Çıkarın



Yapıştırıcının bir kenarını dikkatlice kaldırın ve cildi nazikçe cilt bariyerinden uzağa iterek yapıştırıcının kaldırdığınız kenarını aşağı doğru soyun. Kullanılmış torbayı uygun şekilde atın. Tuvalete atmayın.

Cildi Temizleyip Kurulayın



Cildinizi sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde su veya yumuşak sabunla temizleyin. Tamamen durulayıp kurulayın. Cilt üzerinde yağ, pudra, losyon veya losyon tipi sabunlar kullanmayın.

Cildin Durumunu Kontrol Edin



Stomanızın etrafındaki ciltte (peristomal) tahriş, döküntü veya kızarıklık olmadığından emin olun.*

*Tahriş, döküntü veya kızarıklık olduğunu fark ederseniz, Y01H/Y01BH hemşirenizle iletişime geçin.

Cilt Bariyerini ve Torbayı Hazırlayın



Her bariyer uygulamasından önce bir stoma ölçüm cetveli kullanarak stomanın çapını ölçün (önceden boyutlandırılmış bir bariyer ağız kullanıyorsanız, 7. adıma geçin).



Belirlenen bariyer boyutu ağızını cilt bariyeri üzerine çizin. Cilt bariyeri, cilt ve stomanın birleştiği yere oturmalıdır. Sızıntıyı ve cilt tahrişini önlemeye yardımcı olmak için cilt bariyeri ile stoma arasında cildin hiçbir şekilde görünmediğinden emin olun.



Eğimli küçük bir makas kullanarak cilt bariyerinde dikkatlice modelle eşleşecek şekilde bir ağız kesin. Keserken koruyucu astardaki çizgiyi aşmayın. Torbayı delmeyin.



Koruyucu astarı cilt bariyerinden çıkarın.

Gerekirse Macun veya Halka Ekleyin



Uygunsa, kullanım talimatlarını izleyerek ağız çevresine bir bariyer halkası veya ince bir tabaka macun uygulayın.

Yeni Torba Sisteminin Uygulayın



Cilt bariyeri ağızını stomanın üzerinde ortalayın.



Yapışmanın en iyi şekilde sağlanması için cilt bariyerine yaklaşık bir dakika boyunca hafif bir basınç uygulayın.




Bant kenarlı bariyerler için her iki tarafta da bantın arkasındaki kağıdı çıkararak yapışkanı cilde hafifçe bastırın.



12

Torbanın altını kapatın. Boşaltılabilir bir torba kullanıyorsanız, torbanın altındaki **Lock 'n Roll** mikro kilitli kapağı kapatın veya bir torba kelepçesi uygulayın. Bu kapama sisteminin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla bilgi için **Lock 'n Roll Mikro Kilitli Kapak Bakım Önerilerine** bakın.

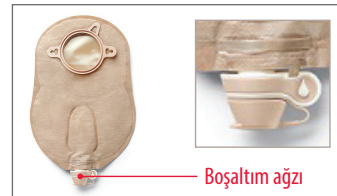

Ürostomi torbası kullanıyorsanız, boşaltım vanasının kapalı olduğundan emin olun. Boşaltım vanasındaki damla, torbanın gövde tarafına bakmalıdır. İstiyorsanız, kutuda sunulan kapağı takın.

Tek Parçalı Torba Sistemi

İPUÇLARI	ÜRÜN LİSTESİ	STOK NUMARASI
<ul style="list-style-type: none">Stomanızın etrafındaki ciltte herhangi bir kızarıklık veya yara belirtisi olmamalıdırTahriş olmuş cilt, bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidirBir bariyer halkası veya macun kullanıyorsanız, bunu, belirtildiği şekilde stoma ağzının yanındaki cilt bariyerinin yapışkan tarafına uygulayınAmeliyattan sonra stomanız muhtemelen şişecektir. Stomanın kalıcı boyutuna küçülmesi birkaç hafta veya ay alabilirTemizlik esnasında stoma hafif şekilde kanayabilirCilt bariyerleri uzun süre kullanıldığında cilt koruyucu mendillerin kullanılması dayanıklılık süresini azaltabileceğinden tavsiye edilmez	<p>Tek Parçalı Torba Sistemi</p> <p>Aksesuarlar</p> <p>Bariyer halkaları</p> <p>Ostomi kemeri</p> <p>Macun</p> <p>Kayganlaştırıcı deodorant</p> <p>Stoma pudrası</p> <p>Diğer _____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Ek Talimatlar

Ürün soruları, numune istekleri veya ürünlerimizle ilgili ayrıntılı klinik sorular için ABD'de **1.888.808.7456** numaralı telefonu arayın. Kanada'da **1.800.263.7400** numaralı telefonu arayın.

www.hollister.com

Cilt bariyeri uygulanmadan önce cildin temiz ve kuru olması gerekir.

Kullanmadan önce Kullanım Amacı, Kontrendikasyonlar, Uyarılar, Önlemler ve Talimatlar ile ilgili bilgi almak için Kullanım Talimatlarını mutlaka okuyun.

Hollister logosu, Lock 'n Roll ve "Sağlıklı cilt. Pozitif sonuçlar." Hollister Incorporated ticari markalarıdır.

© 2018 Hollister Incorporated. 923069-1118 US-00667